

Prestan® Professional AED Trainer PLUS



PRESTAN®

Prestan Professional AED Trainer PLUS



Model PP-AEDT2-101 → Prestan Professional AED Trainer PLUS (kræver fire (4) 'C'-batterier; medfølger ikke) forprogrammeret med Dansk og Engelsk sprog, et sæt træningspuder til voksne/børn med hård opbevaringstaske, to (2) sæt pudestikben (et (1) sæt er en reserve) og en bæretaske.



Model PP-AEDT2-401 → Prestan Professional AED Trainer PLUS 4-pak (kræver seksten (16) 'C'-batterier; ikke inkluderet) - Fire (4) AED-enheder forprogrammeret med Dansk og Engelsk sprog, fire (4) sæt træningspuder til voksne/børn med hårde opbevaringsæsker, otte (8) sæt pudestikben (fire (4) sæt er reservedele) og en 4-pack bæretaske.



START HER - GENERAL INFORMATION

- Brug dette instruktionsark som reference til Prestan Professional AED Trainer PLUS og tilbehør. Læs venligst instruktionerne igennem før første brug.
- Advarsel: Prestan Professional AED Trainer PLUS er kun beregnet til træningsformål. Det er IKKE en automatisk ekstern defibrillator (AED) og giver ikke stød. For at undgå forvirring bør den ALDRIG opbevares i samme område med skarpe hjertestartere.
- Ejeroplysninger – For fremtidig reference bedes du notere den autoriserede Prestan-distributør, hvor du købte din AED Trainer. Kontakt din distributør for produktspørgsmål, genbestilling af dele/tilbehør og/eller garantiproblemer.

Prestan Professional AED Trainer PLUS



FUNKTIONER PÅ PRESTAN PROFESSIONAL AED TRAINER PLUS

- Voksen/barn valgknapper
- Kraftig oplyst stødknap
 - Blinker, når stød anbefales
- Tænd/sluk-knap med tændt indikator og mulighed for programpause
- Robust, vipbart låg
 - Holdbart gennemsigtigt låg og hængsel
 - Åbning af låget tænder ikke for enheden
- Fem træningsscenarier
- Klare og rolige stemmemeddelelser
- Metronom med brystkompression
 - Metronomen kan tændes eller slukkes
 - Metronome hørbare tællepåmindelser ved ti (10), tyve (20) og tredive (30) kompressioner
- Automatisk ELLER semi-automatisk stødafgivelse
- Programmeringsmulighed til enten at inkludere eller ikke inkludere tid til vejtrækninger efter kompressionscyklus
- Fjernbetjening tilgængelig (sælges separat)
- Styrer flere enheder
- Lang batterilevetid
 - Stemmemeddelelsesadvarsel om lavt batteri
 - Automatisk sluk for forlænget batterilevetid
- Programmering er i overensstemmelse med gældende AHA-retningslinjer (2015)
- Nemt at udskifte sprogmodulet, hvis retningslinjerne ændres

TRÆNINGSBLADER MED HØJ YDELSE


Start med at installere dine træningselektroder på enhedens forudinstallerede kabler. Se side 6 for fuldstændige instruktioner.

- Patenteret Pad Sensing System automatisk fremmer scenarieprogrammeringen, når den registrerer, at puderne er blevet forbundet til evt dukke
- Pads holder cirka 100 gange (afhængigt af pleje- og brugsbetingelser)
- Langtidsholdbar klæbemiddel efterlader ingen rodede klæber godt til enhver CPR-dukke
- Pads-kablet er på forhånd tilsluttet til AED-træneren
- Dobbelt grafik giver mulighed for træning af voksne og børn og viser anatomisk placering
- Unikt pudestik med låsestik
- Puderne opbevares i et praktisk hårdt etui til klæbemiddel og sensorbeskyttelse




AED TRAINER PLUS FUNKTIONSGUIDE

FRONT AF ENHEDEN

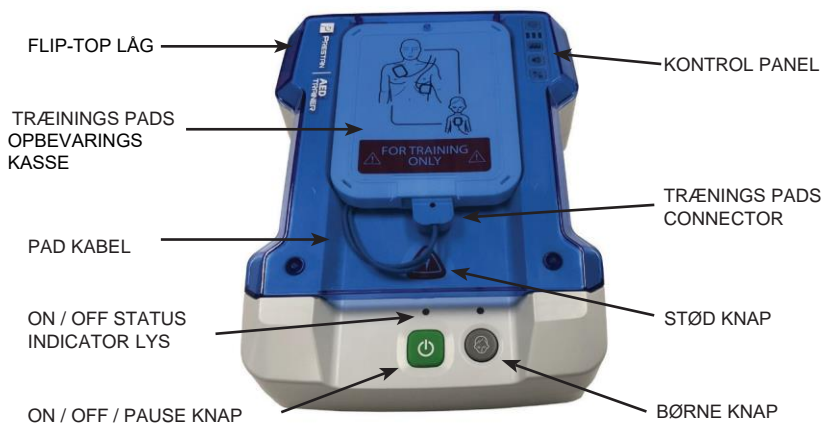

BAGSIDE AF ENHED

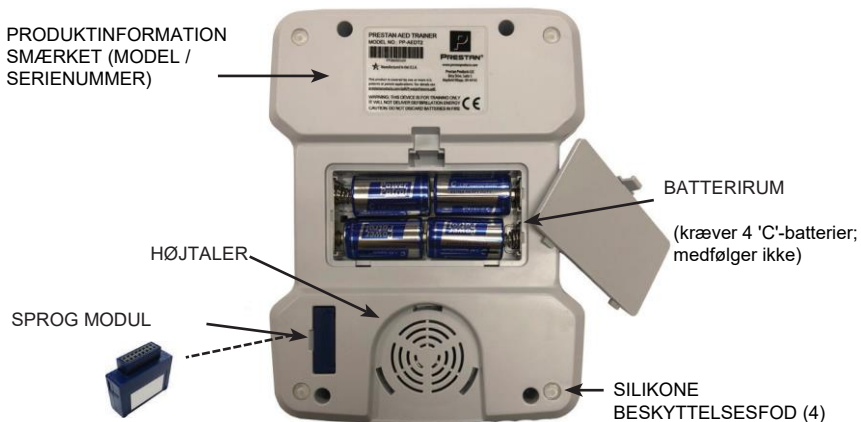

Prestan Professional AED Trainer PLUS



ACTION KNAPPER

ON / OFF KNAK

- Tryk på den grønne knap for at starte programmet / indikatorlyset over knappen tændes
- Når enheden kører, tryk og hold knappen nede i tre (3) sekunder for at slukke for enheden



On/Off Knap

BØRNEKNAK

- Når strømmen er tændt, tilbyder programmeringen en hørbar mulighed for at vælge Child-knappen
- Indikatorlyset over Child-knappen lyser, når Child-indstillingen er valgt og er aktiv
- Indikatorlampen slukker, hvis programmet er sat på pause, men tændes igen, når programmet genoptages



Børne knap

STØD KNAK

- Den røde stødknap blinker, når programmet instruerer om at afgive stød
- I halvautomatisk tilstand vil et tryk på stødknappen, mens den blinker, simulere afgivelsen af et stød og stoppe blinkingen og genoptage programmet
- I automatisk tilstand vil stødknappen blinke ca. seks (6) gange før simulering af autochok og genoptagelse af programmet





Stød Knap

Prestan Professional AED Trainer PLUS




MONTERING, OPSÆTNING OG BRUG

1. Læg træningspuderne til side (øverst i kassen), og fjern papbakken fra forsendelsesemballagen
2. Tag PRESTAN PROFESSIONAL AED TRAINER PLUS ud af æsken
3. Luk PRESTAN PROFESSIONAL AED TRAINER PLUS bæretaske ud, og fjern plastikpakken, der indeholder modulet og stikben
4. Fjern PRESTAN PROFESSIONAL AED TRAINER PLUS fra bæretasken
5. Indsæt SPROGMODULET på bagsiden af enheden i nederste venstre hjørne
6. Pudesamlingen.
 - a. Åbn plastikpakken og tag Prestan Professional Training Pads ud
 - b. Find enderne af AED Trainer-kabler, der ikke er forbundet til enheden
 - c. Sæt hver pude ind i et kabelstik (pudefligen skal muligvis vrikkes på plads, hvis pasformen sidder godt fast), og juster hullet i pudens flig med hullet i stikket. Sørg for, at puderne ikke er installeret på hovedet (se trin e. nedenfor)
 - d. Lås puderne på plads ved at skubbe låsestiften(pin) ind i huller, og sørg for at stiften hviler i fordybningen i kabelstikket

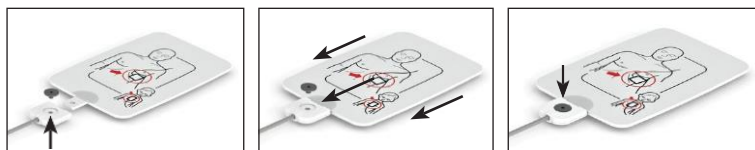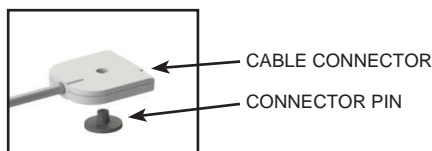

- e. Sørg for, at puderne ikke er installeret på hovedet (pudegrafik skal være på samme side som det store hoved på stikbenet)

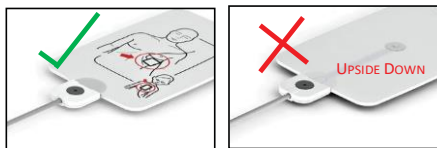

- Fortsættes på næste side -

Prestan Professional AED Trainer PLUS




Montering, opsætning og brug - fortsat

- f. Åbn den hvide plastik itui, der findes i enheden
- g. Vend puden om og fjern den gennemsigtige plastikbeklædning fra AED-puden ved forsigtigt at trykke ned på tappens ende af puden, hvilket får foringen til at adskilles
- h. SMID PLASTFORING VÆK (genbrug af foringen forlænger ikke limens levetid og kan påvirke pudens sensor evne)



- i. Sæt puderne fast på de INDERSTE låg på det hvide plastikpudehus, luk etuiet


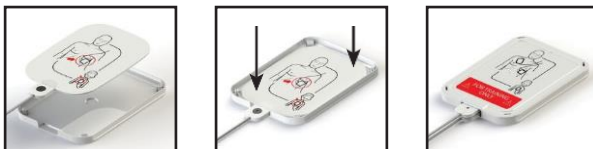


- j. Rul kablerne op, anbring dem i brønden og dæk dem med pudehylsteret




UDSKIFTNING AF TRÆNINGSELEKTRODER

1. Prestan træningspuder vil generelt holde til cirka 100 brug (afhængigt af brug og plejeforhold)
2. Når det er nødvendigt, er det god praksis at udskifte begge puder på samme tid
3. Frigør de eksisterende puder fra de grå kabelstik ved at springe de sorte pudedestikstifter ud fra den lille side med spidsen af en kuglepen

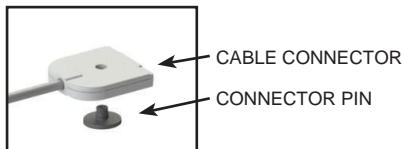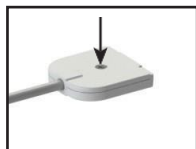

4. Skub de brugte puder ud af kabelstikkene
5. Se trin #6 (pudesamling) på forrige side for at fuldføre installationen

KONTROLPANEL

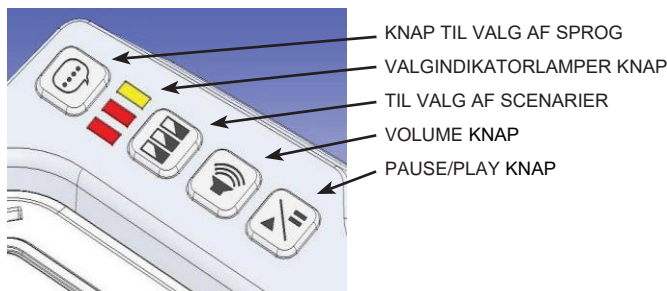

Følgende oplysninger er en guide til tilpasning af din AED Trainer. Enheden kan tilpasses, mens den er tændt eller slukket. Enheden bipper for at bekræfte og slukker (hvis ON) for at nulstille, når et sprog eller scenarievalg er blevet ændret.



KNAP TIL VALG AF SPROG

KNAPPEN TIL SPROGVALG, placeret øverst på alle knapperne på den professionelle AED Trainer PLUS-enhed, vil skifte mellem de tilgængelige sprog.

- Tryk på knappen for at skifte mellem sprogene
- Det sidst valgte sprog forbliver standard, indtil der trykkes på sprogknappen igen for at vælge et andet sprog



VALGINDIKATORLAMPER

VALGINDIKATORLAMPENE er under sprogvalgsknappen. VALGINDIKATORLYGTERNE bruges under opsætningen af enheden. De angiver indstillinger såsom automatisk eller halvautomatisk stødtilstand, ventilationstilstande og metronom.

- Indikatorlys læses fra venstre mod højre









- Fortsættes på næste side -

Kontrolpanel - fortsat






KNAP TIL VALG AF SCENARIER

KNAPPEN TIL SCENARIEVALG er placeret under indikatorlysene.

- SCENARIEVALGKNAPPEN bruges til at vælge et af de fem (5) scenarier, der er tilgængelige på enheden:
 -  En rød indikator betyder 'chok'
 -  En gul indikator betyder "ingen stød"
-  Fabriksindstillingen er for tre (3) cyklusser, som alle er til "chok"
- Ved kontinuerligt at trykke på SCENARIEVALGKNAPPEN vil du gå gennem de fem (5) tilgængelige scenarier:
 - Scenario 1  shock; no shock; no shock
 - Scenario 2  shock; no shock; shock
 - Scenario 3  shock; shock; no shock
 - Scenario 4  no shock; no shock; no shock
 - Scenario 5  shock; shock; shock




VOLUME KANP

- Der er tre (3) lydstyrkeniveauer på enheden
- Ved at trykke på LYDSTYRKE KNAPPEN kan du øge eller mindske enhedens lydstyrke alt efter behov
- Indikatorlamperne lyser for at indikere
 -  Low Volume
 -  Medium Volume
 -  High Volume



PAUSE/PLAY KANP

- Når der trykkes på PAUSE/PLAY-KNAPPEN, vil enheden sætte scenariet på pause
- I pausetilstand lyser tre (3) gule valgindikatorer  og blinker
- Tryk på PAUSE/PLAY-KNAPPEN igen for at genoptage scenariet

Prestan Professional AED Trainer PLUS



PROGRAMMINGSMULIGHEDER

Brug kombinationer af knapper som vist nedenfor for at programmere foretrukne indstillinger for enheden.



AUTOMATISK / HALVAUTOMATISK

Prestan Professional AED Trainer PLUS kan indstilles til automatisk at levere et simuleret stød uden at trykke på stødknappen.

- Prestan Professional AED Trainer PLUS er forudindstillet fra fabrikken i halvautomatisk tilstand – det simulerede stød afgives manuelt ved at trykke på den røde stødknap, når du bliver bedt om det, og knappen blinker
- Sådan ændres denne tilstand:
 - Med AED Trainer slukket, hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der høres to (2) bip (ca. 7-10 sekunder), og slip derefter

- » det første bip er til testtilstand, så vent på det andet bip,
- » stød-knappen vil blinke til og fra

- Se på valgindikatorlamperne:

- » Tre(3) gule lys –  – tilstand vil være halvautomatisk
- » Tre (3) røde lys –  – tilstand vil være automatisk

- Tryk på Shock-knappen for at ændre tilstanden

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte og gemme

VENTILATION TIL/FRA



Prestan Professional AED Trainer PLUS kan give tid til at administrere vejtrækninger mellem kompressionsrunder. Denne mulighed kan slås til eller fra.

- AED Trainer er forudindstillet fra fabrikken med ventilationer ON
- Sådan ændres denne tilstand:
 - Med AED Trainer slukket, hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der høres to (2) bip (ca. 7-10 sekunder), og slip derefter

- » det første bip er til testtilstand, så vent på det andet bip,
- » stød-knappen vil blinke til og fra

- Se på valgindikatorlysene - der vil være tre (3) lysende rødt eller gult afhængigt af din automatiske/halvautomatiske præference

- Tryk på Scenarievalg-knappen  under lysene indtil kun de to første (2) lysene er tændt

- » To (2) gule lys –  – the ventilations setting mode will be ON
- » To (2) røde lys –  – ventilationsindstillingstilstanden vil være FRA

- Tryk på Shock-knappen for at ændre tilstanden

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte og gemme

- Fortsættes på næste side -




Prestan Professional AED Trainer PLUS



Programmeringsmuligheder - fortsat

METRONOME ON / OFF

Når du laver kompressioner, vil Prestan Professional AED Trainer PLUS tælle med tiere (10s) som en guide til hastigheden på 100 kompressioner i minuttet. Programmering tilbyder også et hørbart metronom-flueben (for hver komprimering). Denne mulighed kan slås til eller fra.

- AED Trainer er forudindstillet fra fabrikken med metronom ON
- Sådan ændres denne tilstand:
 - Med AED Trainer slukket, hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der høres to (2) bip (ca. 7-10 sekunder), og slip derefter
 - » det første bip er til testtilstand, så vent på det andet bip,
 - » stød-knappen vil blinke til og fra
 - Se på valgindikatorlysene - der vil være tre (3) lysende rødt eller gult afhængigt af din automatiske/halvautomatiske præference
 - Tryk på Scenariovalg-knappen  under lysene to gange indtil kun den første lysene tændes
 - » Et (1) gule lys –  – metronomindstillingstilstanden vil være ON
 - » Et(1) rødt lys –  – metronomindstillingstilstanden vil være OFF
 - Tryk på Shock-knappen for at ændre tilstanden
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte og gemme

Prestan Professional AED Trainer PLUS



FEATURE SETTINGS

	Ventilations On	Ventilations Off
CPR Metronome On	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmet begynder med at analysere patienten og anbefale stød eller intet stød baseret på brugerscenarieindstilling. 2. En hørbar prompt "BEGIN HLR" starter kompressionscyklussen. 3. Metronomslag og hørbare promptoner "TEN", "Twenty" og "THIRTY" tæller kompression. 4. Efter tredive (30) kompressionstøner holder metronomen pause for en hørbar prompt til "GIVE 2 BREATHS". 5. Kompressionstøner og vejrtrækninger fortsætter i fem (5) cyklusser (to (2) minutter). 6. Enheden analyserer patienten. 7. Cykler gentages på ubestemt tid efter scenariets stødmønster, indtil enheden slukkes manuelt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmet begynder med at analysere patienten og anbefale stød eller intet stød baseret på brugerscenarieindstilling. 2. En hørbar prompt "BEGIN HLR" starter kompressionscyklussen. 3. Kompressionstøner med hørbar prompt til "CONTINUE CPR" hvert 24. sekund (x4). 4. Kompressionstøner fortsætter i to (2) minutter. 5. Enhed analyserer patient. 6. Cykler gentages på ubestemt tid efter scenariets stødmønster, indtil enheden slukkes manuelt.
CPR Metronome Off	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmet begynder med at analysere patienten og anbefale stød eller intet stød baseret på brugerscenarieindstilling. 2. En hørbar prompt "BEGYND HLR" starter kompressionscyklussen. 3. Hørbare promptnoter "TI", "TYVE" og "TREDIVE" komprimering tæller. 4. Efter tid til tredive (30) kompressioner, stopper metronomen for en hørbar prompt "GIV 2 ÅNDTREK". 5. Kompressionstøner og vejrtrækninger fortsætter i fem (5) cyklusser (to (2) minutter). 6. Enheden analyserer patienten. 7. Cykler gentages på ubestemt tid efter scenariets stødmønster, indtil enheden slukkes manuelt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmet begynder med at analysere patienten og anbefale stød eller intet stød baseret på brugerscenarieindstilling. 2. En hørbar prompt "BEGIN HLR" starter kompressionscyklussen. 3. Tavshed undtagen hørbar prompt om "FORTSÆT HLR" hver 24. (24) sekunder (x4). 4. Cyklus stopper ved to (2) minutter. 5. Enhed analyserer patient. 6. Cykler gentages på ubestemt tid efter scenariets stødmønster, indtil enheden slukkes manuelt.

PLEJE- OG RENGØRINGSVEJLEDNING

1. Opbevar Prestan Professional AED Trainer PLUS i etuiet og på et køligt, tørt sted.
2. Sæt altid træningspuderne tilbage på indersiden af lågene på plastopbevaringskassen. Dette beskytter klæbemidlet og sensoren. Det giver også sensoren mulighed for at nulstille programmeringen til næste brug.
3. Hvis enheden skal opbevares i mere end en måned, skal du fjerne batterierne for at beskytte mod korrosion.
4. Saml eller bær aldrig enheden i kablerne.
5. Prestan Professional AED Trainer PLUS skal holdes ren. Hvis det bliver snavset, skal du blot tørre det af med en ren, let fugtig, blød klud. Hvis Trainer er ekstremt snavset, kan almindelige rengøringsmidler bruges med forsigtighed. BRUG IKKE SLIBENDE MATERIALER ELLER RENGØRINGSPRODUKTER PÅ ENHEDEN. UNDSÆK IKKE ENHEDEN I VAND.

GARANTI

Tre (3) års begrænset garanti

Prestan yder en tre (3) års begrænset garanti for sin kerneproduktlinje. Garantien dækker ikke forbrugsvarer. Besøg ressourcesektionen på www.prestanproducts.com for at få alle garantioplysninger, der gælder for dette produkt.

FEJLFINDING / TEST MODUS

Går enhedens programmering ikke forbi "placer puderne på patienten"? Gå ind i TEST MODE for at afgøre, om dine puder eller kabler skal udskiftes. Sørg for, at træningspuderne er opbevaret i pudeopbevaringsetuiet, før du starter testen.

1. Med AED Trainer slukket, hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der høres et (1) bip (ca. 4-6 sekunder), og slip derefter
 - hvis du når to (2) bip, det er programmeringstilstand - sluk enheden og start igen
 - Shock-knappen vil blinke til og fra
2. Fjern en træningspude fra etuiet, og klem let på sensoren (rund skive i midten af klæbemidlet)
3. Hvis der høres et bip - er puden og kablet i god stand
4. Gentag trin 2 og 3 ovenfor med den anden træningspude
5. Hvis der ikke høres et bip - udskift puden med en kendt fungerende pude (se afsnittet Udskiftning af træningspude på side 7) og prøv igen
 - Hvis der nu høres et bip - skulle den originale pude udskiftes
 - Hvis der stadig ikke høres et bip - skal der nye kabler til
6. Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte testtilstand

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	POSSIBLE ISSUES OR COMMENTS	SOLUTIONS
Enheden tænder ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden skal tændes manuelt • Batterierne er ikke korrekt installeret • Batterier mangler, batterier er døde, eller batterikontakter kan være korroderede • Sprogmodulet er ikke installeret 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på den grønne afbryderknop • Reorienter batterierne korrekt • Udskift batterier og kontroller tilstanden af batterikontakterne • Indsæt sprogmodulet på bagsiden af enheden
<p>Begge puder fastgjort til dukken, men enheden går ikke videre til analyse</p> <p>Bemærk: Indtastning af TEST MODE kan give svaret (se forrige side for instruktioner)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Operationel løsning • Puden indsættes baglæns i kabelstikket • Pude eller klæbemiddel er slidt eller klæbemiddel er snavset 	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at puderne trykkes fast, så sensoren i midten af klæbemidlet fladt rører en overflade (tryk ned på midten af puden) • Skub den sorte stikben ud, vend puden rundt og fastgør igen med den sorte stikben (se instruktionerne til udskiftning af træningspuden på side 7) • Udskift puden (puder holder ca. 100 gange med korrekt pleje)
Enheden fortsætter med at analysere, før begge puder er blevet placeret på dukken	<ul style="list-style-type: none"> • Puderne er ikke korrekt placeret i pudekassen før start af programmet 	<ul style="list-style-type: none"> • Flyt puderne i etuiet til at ligge helt fladt, og sensoren er placeret i det forsænkede område af pudehuset
Enheden afgiver stød, før der trykkes på stødknappen	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden er i automatisk tilstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Skift tilbage til halvautomatisk tilstand (se instruktionerne på side 10)
Enhedens prompter "Udskift batterier"	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden vil køre ti (10) timer eller mere med lavt batteriniveau 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift batterierne inden for ti (10) timer
Enheden lukker pludselig ned	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierne er meget lave, næsten døde 	<ul style="list-style-type: none"> • Installer nye batterier
Puden trækkes ud af pudestikket	<ul style="list-style-type: none"> • Den sorte pudestik kan mangle 	<ul style="list-style-type: none"> • Installer ny sort stikben
Puden klæber ikke til dukken	<ul style="list-style-type: none"> • Klæbemidlet er slidt eller kan være blevet snavset 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift pads (pads holder ca. 100 gange med korrekt pleje)

Kontakt din autoriserede Prestan-forhandler for garantihjælp

Prestan Professional AED Trainer PLUS



DELE OG TILBEHØR



PP-AEDT2-100-R
Fjernbetjening til
Professionel AED Trainer PLUS
Valgfri fjernbetjening (kræver to
(2) 'AA'-batterier; medfølger ikke).
Tillader kontrol af flere enheder ad
gangen. Har "pads on/off" og
"push hårdere" prompter.



11401
Enkelt bæretaske til den
professionelle AED Trainer
PLUS



11402
4-Pak bæretaske til den
professionelle AED Trainer PLUS



PP-APAD2-1
Enkelt sæt træningspuder til voksne/
børn til den professionelle AED
Trainer PLUS



PP-APAD2-4
Fire (4) sæt træningspuder til voksne/
børn til den professionelle AED Trainer
PLUS



RPP-AEDT2-KABEL
Sæt med
erstatningskabler til den
professionelle AED Trainer
PLUS



PP-ACASE2-1
Udskiftningspudeopbevarings
sæt til den
professionelle AED
Trainer PLUS



PP-AEDT2-101-DK Engelsk/Dansk
sprogmodul til den professionelle AED-
træner PLUS.
Yderligere sprog tilgængelige baseret
på distributør-repræsenteret geografisk
område.